



#### Cirugía de artroscopia de rodilla

Accesorios recomendados:  
230000760 Almohadilla de gel para cabeza en forma de donax1  
230000769 Almohadilla de gel para placa torsox1  
121000294 Apoya brazosx2  
121000532 Soporte de rodilla



#### Procedimientos Ortopédicos

Accesorios recomendados:  
230000760 Almohadilla de gel para cabeza en forma de donax1  
230000769 Almohadilla de gel para placa torso x1  
121000358 Tracción de ortopedia x1



#### Cirugía Rectal

Accesorios recomendados  
121000294 Apoya brazosx2  
121000347 Apoya Pies (1 par)  
121000348 Clamp de fijaciónx2  
121000355 Soporte para iliacosx1



#### Cirugía Abdominal/Tórax


Accesorios recomendados  
230000760 Almohadilla de gel para cabeza en forma de donax1  
230000769 Almohadilla de gel para sección torso x1  
121000294 Apoya brazosx1  
121000349 Apoya brazos – Posición altax1  
230000766 Almohadilla universalforma de cúpulax1



## Agesitab OP850 Mesa electrónica de operación



Mesa electrónica para operaciones de alto rendimiento, sostiene hasta 297kg de carga, cumple con los requisitos para diferentes tipos de cirugía.

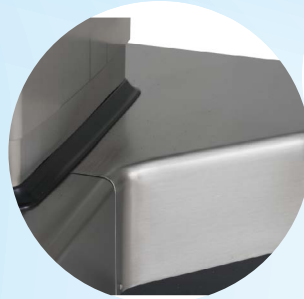

① **Material de calidad Premium**

- Todo el material expuesto está hecho de acero inoxidable SUS304
- Fácil de limpiar y desinfectar
- Todas las partes para el control son importadas



② **Batería incorporada de alta eficiencia**

- Importada de Panasonic
- Tiempo de trabajo, máximo 15 días
- Tiempo de trabajo, máximo 85 operaciones normales
- No requiere alimentación CA para aumentar la seguridad de la cirugía



③ **Acceso perfecto para Rayos X**

- Sección de la cabeza y piernas con mesa de excelente radiolucencia, garantiza una alta calidad en la toma de rayos X.
- Intercambio entre la sección de la cabeza y las piernas



④ **Ajuste Ergonómico**

- Diseño conveniente para tirar la placa de las piernas y la placa de la cabeza, pueden moverse con una sola mano.
- Resortes de gas importados garantizan un movimiento suave.
- Clamp de fijación importado, los accesorios son fáciles de bloquear y desbloquear, ahorra tiempo durante la operación.
- Mesa de altura ajustable (700-1100mm) y base en forma de "T" proporcionan condiciones de trabajo confortables.



⑤ **Configuración quirúrgica**

- Con una tecla, se reinicia la función Flexy-Re-flex.
- Los ángulos de la mesa y las longitudes de las placas se pueden ajustar dentro de una amplia gama. Accesorios, 6 estándar y 13 opcionales.



⑥ **Seguridad**

- Sistema de bloqueo automático: la base de la mesa se bloqueará automáticamente, una vez el controlador ajusta la posición deseada. De este modo, se pueden prevenir posibles errores en la operación.
- Dos modos de control: panel de control manual y panel de control en la columna. En caso de que alguno de los controles se dañe, el otro servirá de respaldo; de esta forma se asegura la seguridad durante la operación.
- El panel de control se apagará automáticamente, cuando no se realiza ninguna operación por más de un minuto; esto con el objetivo de prevenir errores en el funcionamiento de la mesa.

⑦ **Colchón**


- Con textura suave y relleno de espuma de memoria, unido ultrasónicamente y sellado. Fácil para la desinfección y esterilización.
- Reduce de forma efectiva la posibilidad de úlceras en el paciente.




⑧ **Incorporado puente elevador de riñón**

- Ningún efecto negativo de radiolucencia de rayos X, apoya eficientemente la cirugía renal y de vesícula biliar.



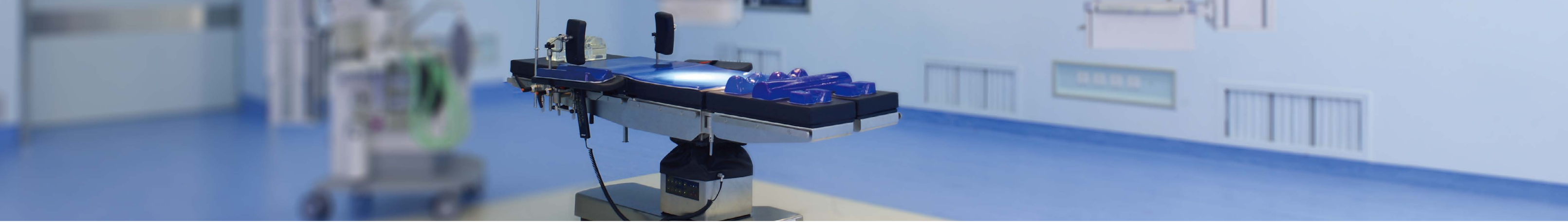

Amplia gama de ajustes para todas las posiciones. Satisface la demanda de diferentes tipos de cirugías.

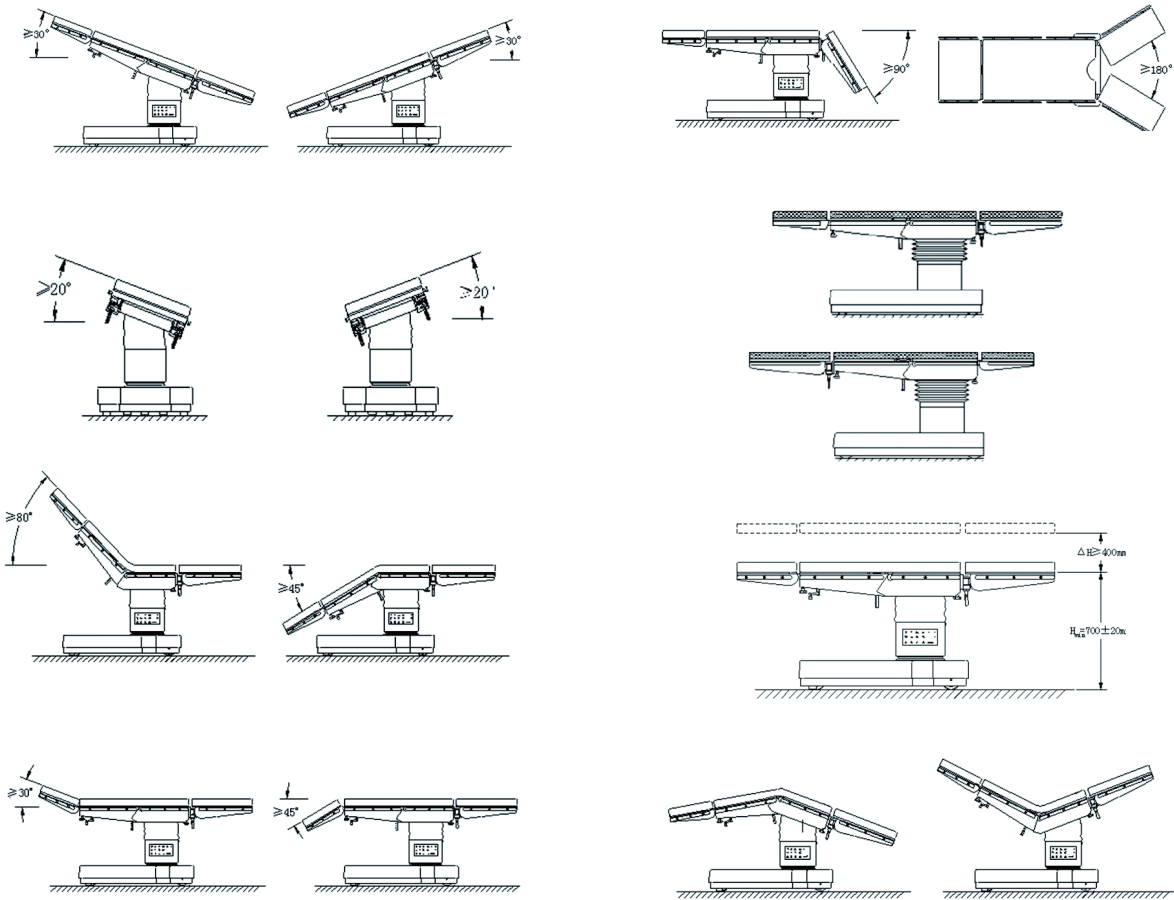

OP850 es una mesa de operación electrohidráulica de alta calidad que satisface los requisitos de seguridad en base a los estándares europeos, cuenta con un sistema de operación flexible y conveniente.

OP850 será la mejor elección para las salas de operacies modernas

Especificación de técnicas

Longitud de la mesa (mm)	2020
Ancho de la mesa (sin los rieles laterales)(mm)	520
Altura de la mesa (sin el colchón)(mm)	650-1000
Trendelenburg / Reversa	30°/30°
Inclinación lateral (izquierda/derecha)	20°/20°
Placa espalda Arriba/Abajo	80°/45°
Placa cabeza Arriba/Abajo	30°/45°
Placa piernas Abajo	20°/90°
Placa piernas Split (0)	180
Flex/Reflex (0)	240 / 120
Puente elevador de riñón Arriba (mm)	128
Fuente de alimentación (Hz)	AC 90V- 264V 50/60
Salida de Batería (AH)	DC 24V 12
Capacidad de carga (kg)	297
Superficie de la mesa transparente a los rayos X	Sí
Desplazamiento longitudinal(mm)	300

Accesorios Opcionales  
Características

Todos los accesorios de la mesa están hechos de acero inoxidableSUS304;todas las superficies son fáciles de limpiar y desinfectar. Se cuenta con accesorios, 6 estándar y 13 opcionales, los cuales apoyan múltiples posiciones del cuerpo y procedimientos. Satisface plenamente las exigencias en la cirugía

121000347 / 121000348  
Apoya pies (Clamp de fijación)

121000349/  
Apoya brazos – Posición alta

121000351/  
Soporte conector

\* 121000350 / 121000351  
Apoyacabeza (Soporte conector)

121000352/ 121000351  
Placa cabeza (Soporte conector)

121000353/  
Mesa para operaciones de la mano

121000354/  
Bandeja para instrumentos

121000355/  
Soporte para Iliacos

121000355/  
Cojín Intervertebral

121000357/  
Recipiente para drenaje

\* 121000358  
Tracción de Ortopedia

121000360 /  
Porta sueros

Características de Ortopedia










La Tracción de Ortopedia esta diseñada con base a los requerimientos de la EU, cumple con la mayor parte de los requisitos de las cirugías de ortopedia.Todas las partes están hechas de acero inoxidable SUS304 de alta resistencia dando estabilidad durante las cirugías.La estructura es adecuada para Rayos – X y Brazo – C.

Accesorios Estándar:

		
121000248 Clamp de fijación	121000247/ Arco de anestesia	121000251/ Correa para el cuerpo
		
121000294 Apoya brazos	121000296/ Soporte lateral	121000295/ Perneras para rodillas

Almohadillas de Gel  
Funciones&Características:

Suministra una posición estable y confortable. Hechas de gel de polímero viscoelástico. Dispersión de la presión, evita las úlceras, reduce el tiempo de operación, fácil de limpiar, rayos X, temperatura de trabajo desde -10°C a 50°C. Buena biocompatibilidad con los tejidos humanos. Rentable y durable.

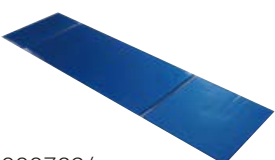		
230000759/ Almohadilla apoyacabeza boca abajo	230000761/ Almohadilla para la cabeza en forma de dona	230000763/ Almohadilla para la cabeza en forma de herradura
		
230000764/ Almohadilla apoya cabeza de soporte de horquilla oftálmico	230000765/ Almohadilla lateral	230000767/ Almohadilla en forma de cúpula para brazo/piernas
		
230000767/ Almohadilla contornada para brazo/pierna	230000768/ Almohadilla apoyo de talón	230000769/ Almohadilla sección torso

Posiciones para cirugía:



**Cirugía de tórax/abdominal**  
Accesorios recomendados:  
- 230000760 Almohadilla de gel para cabeza en forma de dona x1  
- 230000769 Almohadilla de gel para placa torso x1  
- 121000347 Apoya pies 1 par  
- 121000348 Clamp de fijación x 2  
- 121000294 Apoya brazos x 2



**Cirugía Nariz, Oídos, Garganta**  
Accesorios recomendados:  
- 230000760 Almohadilla de gel para cabeza en forma de dona x1



**Procedimientos quirúrgicos Urología/OB/Ginecología**  
Accesorios recomendados:  
- 230000760 Almohadilla de gel para cabeza en forma de dona x1  
- 230000769 Almohadilla de gel para sección torso x1  
- 121000295 Perneras de rodilla x2  
- 121000357 Recipiente de drenaje x1  
- 121000294 Apoya brazos x2



**Cirugía columna vertebral**  
Accesorios recomendados:  
- 230000759 Almohadilla apoyacabeza boca abajo x1  
- 121000356 Almohadilla intervertebral x1  
- 121000294 Apoya brazos x2  
- 230000769 Almohadilla de gel para sección torso x1  
- 230000766 Almohadilla universal forma de cúpula x1



**Operación de Hombros**  
Accesorios recomendados:  
- 121000294 Apoya brazos x2  
- 121000350 Apoya cabeza x 1  
- 121000351 Soporte conector x1



**Neurocirugía**  
Accesorios recomendados:  
- 121000294 Apoya brazos x2  
- 121000350 Apoya cabeza x1  
- 121000351 Soporte conector x1  
- 230000769 Almohadilla de gel para sección torso x1  
- 230000766 Almohadilla universal forma de cúpula x1